

食品微生物検査用

滅菌希釈液 Pro-media MT・MVシリーズ

- 滅菌済みでディスポーザブル
- 希釈液の調整不要
- 常温保存可能
- 6タイプの中から、用途に合わせてお選び下さい
- 使い方は簡単



総発売元


株式会社 エルメックス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp

試料原液作成と MT-11 を用いた段階希釈

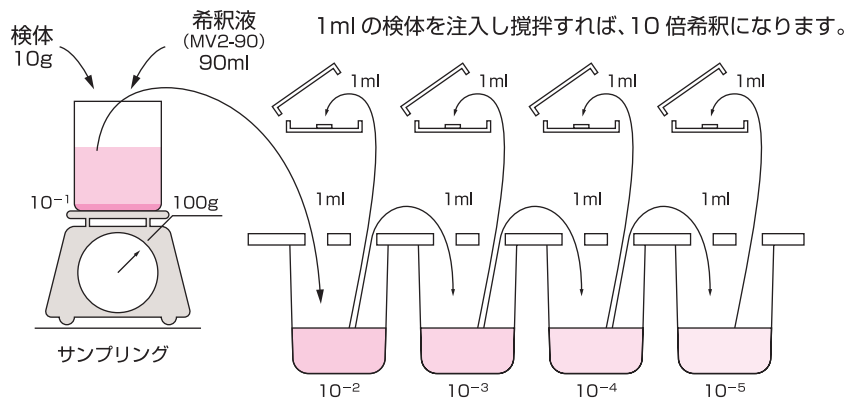

使用方法

MT-11

- MT-11 は段階希釈用です。カップに 9ml の希釈液が入っています。
 - アルミシール表面をアルコール滅菌してから火炎滅菌します。
 - 専用のオープナー (OS-01/ 別売) で、1 カップ毎に“検体注入口”と“検体吸引口”の 2 箇所開栓します。
段階希釈方法は上記の図をご参照下さい。
 - MT-11 は、4 カップ連結されています。1 カップずつ手で切り離すことができます。
- ＜注＞ 切り離して残ったカップの希釈液を次回使用する際は、必ず上記 2. 通り滅菌してご使用下さい。



MV2-90

- MV2-90 は検体 10g 用の試料原液作成用です。90ml の希釈液が入っています。
 - MV2-90 のアルミシールを消毒用アルコールで滅菌して下さい。
 - アルミシールを開けて、検体 10g を入れたホモジナイズバッグまたはフィルタバッグに、MV2-90 全量をいれてホモジナイズしたものを、試料原液として検査に供します。
- ＜応用例＞ 液体や粉体が検体の場合、アルミシールを半分ほどあけて、検体を直接 MV2-90 の容器に入れ、シールを戻して指でしっかり押さえて攪拌したものを試料原液として検査に供します。(右写真)



（応用例）
シールをあけて検体を入れ、攪拌する。

MV-225、MV-225AP

- MV-225 および MV-225AP (腸炎ビブリオ用) は、検体 25g 用の試料原液作成用です。225ml の希釈液が入っています。
- MV 容器のアルミシールを消毒用アルコールで滅菌して下さい。
- アルミシールを開けて、検体 25g を入れたホモジナイズバッグまたはフィルタバッグに、MV-225 または MV-225AP の全量を入れてホモジナイズしたものを、試料原液として検査に供します。
- MV-225AP は、これを 24 時間 35～37℃ で培養したものを選択培地に塗抹します。
選択培地に関しては、培地メーカーの発行する取扱説明書に従って下さい。



MV2-1000

- MV2-1000 および MV-5000 は試料原液作成用です。自動秤量分注装置に接続してお使い下さい。
- キャップの部分を消毒用アルコールで滅菌してから開栓し、装置の輸液セットに下記要領で接続して下さい。
 - (1) MV2-1000：DT-II の場合は小さい口 (白いキャップ)、DT cube の場合は大きい口 (青いキャップ) に接続して下さい。
 - (2) MV-5000：専用のアダプタをご使用下さい。



MV2-1000 と DT cube
送液ユニットとの接続

商 品 名	コード No.	仕 様		検 体	入 数	材 質
滅菌希釈液 Pro・media MT-11	MT-11	りん酸緩衝生理食塩水	段階希釈用 9ml	1ml	128カップ	容器：PP、シール：アルミ
滅菌希釈液 Pro・media MV2-90	MV2-90		試料作成用 90ml	10g	40 本	容器：PE、シール：アルミ
滅菌希釈液 Pro・media MV-225	MV-225		試料作成用 225ml	25g	40 本	容器：PET、キャップ：アルミ
滅菌希釈液 Pro・media MV2-1000	MV2-1000		試料作成用 1,000ml 装置用	任意	10 本	容器：PE、キャップ：PP、アルミ
滅菌希釈液 Pro・media MV-5000	MV-5000		試料作成用 5,000ml 装置用	任意	2 本	容器：PE、キャップ：PE
滅菌希釈液 Pro・media MV-225AP	MV-225AP	アルカリペプトン水	試料作成用 225ml 腸炎ビブリオ用	25g	40 本	容器：PET、キャップ：アルミ

- 仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
- フィルタバッグやホモジナイズバッグは、PYXON とご指定下さい。

- ホモジナイザや自動秤量分注装置もエルメックスにお任せ下さい。
- 当希釈液は、食品微生物検査用です。

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL: /www.elmex.co.jp e-mail: sales@elmex.co.jp